

# PioneerCare

## Руководство Пользователя



Ирригатор для полости рта  
TI-1001



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	6
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ.....	6
ЗАЛИВКА ВОДЫ.....	6
ЧИСТКА ЗУБОВ .....	7
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.....	8
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	10
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	10

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.*

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ирригатор предназначен для личного применения в домашних условиях и не предназначен для профессионального или коммерческого использования, в том числе в стоматологических клиниках и других организациях.

Перед использованием устройства полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Ирригатор предназначен исключительно для очистки зубов и полости рта. Запрещается использовать прибор не по его прямому назначению.
- При наличии заболеваний ротовой полости, если вы перенесли стоматологическое хирургическое вмешательство в течение 2 последних месяцев перед использованием ирригатора, если у вас наблюдаются проблемы с пломбами, коронками и т.п., перед использованием ирригатора проконсультируйтесь со стоматологом.
- Если после использования прибора у вас появляется сильная кровоточивость десен, не прекращающаяся на протяжении 2 недель, проконсультируйтесь со стоматологом.
- При наличии любых других сомнений перед использованием этого прибора проконсультируйтесь у врача.
- При ношении зубных протезов проверьте, допускается ли очистка ротовой области водой под давлением. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения протезов и имплантов.
- Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все съемные приспособления.

- Не направляйте струю воды из ирригатора под язык, в уши, нос, на глаза или другие чувствительные участки тела. Струя воды под давлением может повредить слизистую оболочку или привести к травмам.

- Не используйте прибор при наличии ранок в ротовой полости.

Ирригатор следует использовать в помещении, запрещается использовать прибор на улице.

- Запрещается погружать корпус прибора в воду или другую жидкость либо разбрызгивать на него жидкость.

- Если прибор упал в воду во время зарядки, во избежание поражения электрическим током сначала отключите провод от источника питания и только потом можете достать прибор из воды.

- Запрещается добавлять в воду ополаскивателя, не предназначенные для использования с ирригаторами. Не заливайте в резервуар ополаскивателя, содержащие масла, йод или отбеливающие ингредиенты.

- Во избежание ожога запрещается заливать в резервуар горячую (выше 40°C) воду.

- Запрещается оставлять устройство, в т. ч. на время зарядки батареи, под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла.

- Перед подключением к источнику питания убедитесь, что его характеристики совпадают с характеристиками, указанными на маркировке прибора.

- Перед зарядкой батареи прибора его следует выключить.

- Запрещается заряжать батарею слишком долго, отключайте прибор от электросети после того, как батарея зарядится, в противном случае срок ее службы сократится.
- Запрещается заряжать встроенную батарею при температуре ниже 5°C или выше 35°C.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается заряжать аккумулятор устройства в местах с повышенной влажностью, вблизи источников влаги и ёмкостей с водой (например, в ванной, в непосредственной близости от кухонной раковины, в сырых подвальных помещениях, рядом с прудом или бассейном и т. д.).
- Запрещается прикасаться мокрыми руками к прибору, подключенному для зарядки к сетевому адаптеру питания.
- Запрещается самостоятельная разборка, внесение изменений в конструкцию прибора или использование каких-либо аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- Запрещается использовать неисправный прибор или поврежденный провод питания. Если прибор неисправен или шнур поврежден, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Бережно обращайтесь с прибором, не бросайте и не роняйте его.
- Не включайте прибор без воды. Не используйте ирригатор без насадки.
- Запрещается вытягивать, сгибать или скручивать насадку.
- Проводите замену насадки каждые 6 месяцев.
- По окончании использования сразу сливайте воду, не допускайте застоя воды в резервуаре. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать устройство без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

### **ВНИМАНИЕ:**


***Запрещается блокировать выход воды из насадки во время работы прибора.***

***Запрещается использовать ирригатор более 10 минут за один раз.***

***Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.***

***Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, которые возникли вследствие неправильного обращения с прибором или из-за нарушения мер безопасности.***

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

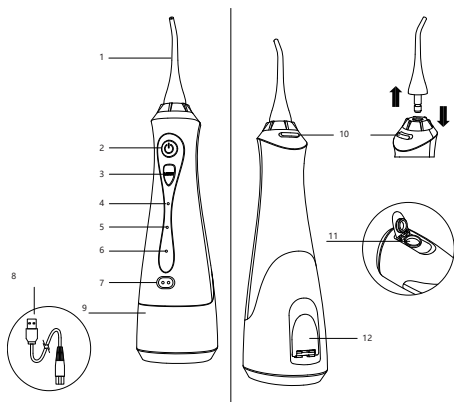

1. Насадка
2. Кнопка включения/выключения
3. Кнопка переключения режимов
4. Индикатор стандартного режима
5. Индикатор деликатного режима
6. Индикатор импульсного режима
7. Разъем для подключения кабеля для зарядки
8. USB-кабель для зарядки батареи
9. Резервуар для воды
10. Кнопка снятия насадки
11. Отверстие для заливки воды
12. Крышка отверстия для заливки воды

## ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Перед зарядкой батареи прибора его следует выключить кнопкой включения/выключения.

Подключите один конец кабеля для зарядки батареи к соответствующему разъему на корпусе прибора, а другой конец – к источнику питания USB.

Во время зарядки батареи будут мигать индикаторы режимов на корпусе.


Для полного заряда батареи требуется 2–4 часа.

Когда батарея полностью зарядится мигание индикаторов прекратится и они будут гореть постоянно. Отключите прибор от источника питания, не допускайте перезаряда батареи.

## ВНИМАНИЕ

**Во время зарядки аккумулятора работа ирригатора блокируется.**

## ЗАЛИВКА ВОДЫ

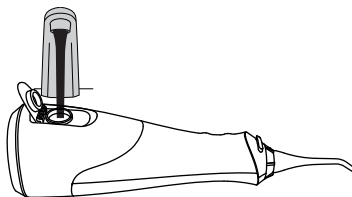

Откройте крышку резервуара для воды и расположите прибор горизонтально. Залейте в резервуар воду прямо из-под крана или из стакана. Затем закройте крышку резервуара.

## ЧИСТКА ЗУБОВ


Перед использованием ирригатора почистите зубы обычной зубной щеткой. Имейте в виду, что ирригатор не заменяет собой зубную щетку, а обработка зубов ирригатором является составной частью комплексного ухода за зубами.

Зарядите батарею прибора.

Залейте в резервуар воду.

Установите насадку ирригатора, вставив ее в соответствующее гнездо и прижав до защелкивания.

Наклонитесь над раковиной. Слегка приоткройте рот, чтобы во время чистки вода не разбрызгивалась вокруг, но могла свободно стекать в раковину. Поместите в рот насадку, направив ее на зубы со стороны десен и расположив под углом порядка 45° к поверхности зубов.

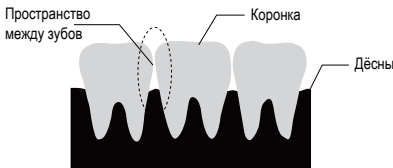

Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить прибор.

Последовательно нажимая кнопку переключения режимов, выберите подходящий режим – на корпусе должен загореться соответствующий индикатор. В начале использования, пока ваши десны еще не привыкли, рекомендуется использовать деликатный режим.

При использовании ирригатора на протяжении более 6 секунд в любом режиме этот режим запоминается и будет использован по умолчанию при следующем включении прибора.

Для достижения наилучшего результата перемещайте насадку ирригатора от крайних зубов к передним, немного задерживаясь в промежутках между зубами.

По окончании чистки нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить прибор.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Ирригатор также выключается автоматически через 3 минуты после включения.*

Откройте крышку резервуара и слейте оставшуюся воду. Если при работе прибора вы использовали какие-либо добавки к воде, то сполосните резервуар чистой водой и затем пропустите через прибор около 100 мл чистой воды.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Рекомендуется проводить замену насадки каждые 6 месяцев.*

## ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

### Надо ли использовать ирригатор, если кровоточат десны?

Кровоточивость десен вызвана размножением бактерий в пространстве между зубами. Используйте ирригатор утром и вечером, и воспаление и кровоточивость десен должны пройти. Если вы регулярно используете ирригатор несколько дней подряд, но кровоточивость десен продолжается, обратитесь к стоматологу.

### Как понять, насколько эффективна чистка зубов ирригатором?

Основная функция ирригатора – удалять налет с зубов и отложения между зубами. Часто зубной налет не виден невооруженному глазу, и поэтому для оценки эффективности использования ирригатора используйте следующие критерии. Со временем десна должны перестать кровоточить, воспаление должно уменьшиться, цвет десен должен из красного стать розовым, десна между зубами должны принять острую, а не сглаженную форму. Обычно здоровье десен существенно усиливается спустя 2–4 недели регулярного использования ирригатора. Вы можете дополнительно проконсультироваться у стоматолога по данному вопросу.

### Может ли ирригатор полностью очистить зубы?

Как составная часть гигиены зубов использование ирригатора позволяет очистить зубы от всех остатков пищи и устранить зубной налет. Тем не менее, некоторые особо крупные или липкие кусочки пищи могут остаться.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Если из насадки после включения прибора не начинает выходить вода, переверните прибор насадкой вниз на несколько секунд. Если это не помогло, возьмите насадку в рот и втяните из нее воздух губами.



## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение: 5 В, 1 А

Емкость батареи: 1800 мАч

Мощность: 5 Вт

Время зарядки батареи: 2-4 ч

Объем резервуара: 230 мл

*Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED. Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП», 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).





pioneer-bt.ru

