

Pioneer

Руководство Пользователя



*Многофункциональный
интеллектуальный массажер
PMH-020*

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
ЗАМЕНА НАСАДКИ.....	6
ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ	8
ЧИСТКА ПРИБОРА	8
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	9
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	10
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.....	11

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Массажер предназначен для массажа и самомассажа различных частей тела с целью похудения, тонизирования кожи, мышечной релаксации, шлифовки огрубевшей кожи ног в домашних условиях.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- При наличии сердечно-сосудистых и иных заболеваний, или если вы беременны, перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.
- Прибор следует использовать не ранее чем через час после еды.
- Запрещается использовать прибор на одном и том же участке тела непрерывно более 15 минут.
- Запрещается массировать прибором голову и лицо.
- Если во время использования прибора вы чувствуете головокружение, тошноту, боль в груди или у вас появились другие симптомы, немедленно прекратите использование массажера и обратитесь к врачу.
- Перед подключением прибора к электрической розетке убедитесь, что характеристики электросети совпадают с характеристиками прибора.
- Запрещается сильно изгибать, пережимать шнур питания.
- Запрещается переносить прибор за шнур питания.
- Запрещается разбирать или пытаться самостоятельно чинить неисправный прибор. В случае неисправностей за ремонтом обращайтесь в авторизованные сервисные центры производителя.
- Перед каждым включением осмотрите прибор и убедитесь, что он полностью собран и все его детали в исправном состоянии.
- Сетчатая крышка может использоваться только с плоской или волнистой насадкой. Запрещается использовать ее с роликовой насадкой или теркой для ног.
- Если сетчатая крышка износилась, прекратите ее использование и приобретите новую.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или ударялся.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует удалить безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

- Запрещается использовать прибор под одеялом или чем-либо накрывать его во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора.
 - Содержите прибор в чистоте. Регулярно проводите чистку прибора.
 - Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
 - Запрещается использовать прибор при температуре выше +35°C.
 - Запрещается погружать прибор в воду или мыть его под краном.
 - Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
 - При появлении неисправностей в работе немедленно выключите его и прекратите его использование.
 - Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- возникшие вследствие неправильной эксплуатации.

Несоблюдение правил эксплуатации лишает вас права на бесплатное гарантийное обслуживание. Производитель не несет ответственности за повреждения и любой ущерб,

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:



1. Переключатель питания и скорости
2. Ручка
3. Сетчатая крышка

Насадки

В комплекте с прибором поставляется четыре дисковых насадки:



- терка для огрубевшей кожи ног;



- роликовая насадка;




- плоская насадка;



- волнистая насадка.

ЗАМЕНА НАСАДКИ

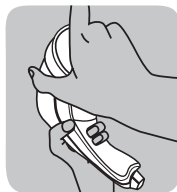


Снимите сетчатую крышку.



Нажмите на два углубления на основании вращающейся головки массажера и потяните за установленную насадку вверх, чтобы ее снять. Приложите и прижмите подходящую насадку. При необходимости сверху установите сетчатую крышку. Сетчатую крышку можно устанавливать только при использовании плоской или волнистой насадки.

ВНИМАНИЕ:

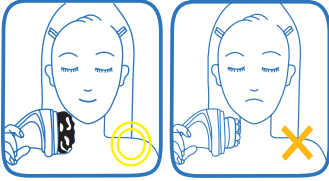


Сетчатую крышку следует устанавливать при использовании на участках тела, где волосы могут случайно попасть на насадку, чтобы они не накрутились и не запутались.


ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Подключите вилку питания к электрической розетке.
2. Поверните переключатель питания и скорости в сторону обозначения «ON», чтобы включить прибор. Затем поворачивая переключатель установите нужную скорость вращения.
3. Во время использования массажера вы можете держать его двумя способами:

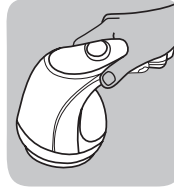

- за центральную часть прибора;

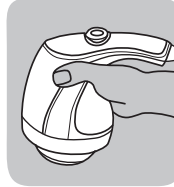

- за ручку.

4. По окончании использования поверните переключатель питания и скоростей в положение «OFF», чтобы выключить прибор. Отключите вилку питания от розетки.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Придание тонуса
нижним сторонам
рук



Снятие напряжения
в плечах и спине



Уменьшение живота
и создание очер-
ченной талии



Придание формы
и тонуса ягодицам



Уменьшение объе-
ма бедер и снятие
мышечного напря-
жения



Расслабление
уставших мышц икр
и уменьшение боли



Удаление огрубев-
шей кожи со ступ-
ней и пяток

ЧИСТКА ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ:

**Перед чисткой прибора всегда
следует его выключить и отсоеди-
нить от электросети.**

**Запрещается мыть прибор под
краном или погружать его в воду
или другую жидкость.**

Протирайте прибор мягкой тканью.
При необходимости допустимо ис-
пользовать нейтральное моющее
средство. При этом следите, чтобы
влага не попала внутрь корпуса.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка приборов проводятся всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке.
- Транспортировка приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, проведите его чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соот-

ветствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:

~220–240 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 25 Вт

Максимальная скорость вращения: 2500 оборотов/мин

Вес: 1,0 кг

Рабочая температура:

от +5°C до +35°C

ПРИМЕЧАНИЕ:

В связи с постоянным совершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления об этом пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ
ЛИМИТЕД. Адрес: Офис Д2 28/Ф, ТГ
Плейс, 10 Шин Ип Стрит, Кван Тонг,
Коулун, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY
LIMITED Add: Room D2, 28/F., TG
Place, 10 Shing Yip Street, Kwun
Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномо-
ченная на принятие претензий
на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,
Московская область, г. Электро-
сталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в свя-
зи со сменой изготовителя, продав-
ца, производственного филиала,
импортера в РФ. В случае измене-
ния данных актуальная информация
указывается на дополнительной на-
клейке, размещенной на упаковке
изделия.*

Дата производства указана на упа-
ковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осу-
ществляется согласно прилагаемо-
му гарантийному талону. Гаран-
тийный талон и инструкция по эксплу-
атации являются неотъемлемыми
частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобрете-
ние продукции **PIONEER**. Мы рады
предложить вам изделия, разрабо-
танные и изготовленные в соответ-
ствии с высокими требованиями
к качеству, функциональности и ди-
зайну. Мы уверены, что Вы будете
довольны приобретением изделия
от нашей фирмы. В случае если ваше
изделие марки **PIONEER** будет
нуждаться в техническом обслужива-
нии, просим вас обращаться в один
из авторизованных сервисных цен-
тров (далее – АСЦ). С полным спи-
ском АСЦ и их точными адресами
вы можете ознакомиться на сайте
pioneer-bt.ru.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Срок гарантии составляет 6 месяцев.
2. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);
- чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

4. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

5. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится

бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.

6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
7. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
8. Изготовитель не несет ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

Руководство Пользователя

Изделие	Многофункциональный интеллектуальный массажер		
Модель	Pioneer PMF-020, blue		
Серийный номер / Serial Number			
Версия / Version	V1Z03	Дата производства / Production Date	03.2023
Срок гарантии	1 год	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет.

Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

pioneer-bt.ru

Pioneer